

# РЧА

## СИСТЕМА РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ COOL-TIP

### АБЛЯТОР COOL-TIP

Поєднує в собі переваги старого приладу та свіч-контролера, а також має новий простий інтерфейс керування.

Використовується для абляції пухлин в печінці, легені, нирок і кістки. **Електроди Cool-tip** сприяють створенню сферичної форми коагулята.




### СПЛІТ-ТЕХНОЛОГІЯ В ПЛАСТИНІ ПАЦІЄНТА



Незалежний моніторинг  
у кожній половині пластини

### «ДИХАЮЧА ПІДКЛАДКА»

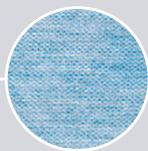

Розсіює тепло  
пластини

### ЕЛЕКТРОД



**20,5 G:** Діаметр температурної проби  
**18 G:** Діаметр канюлі

## АБЛЯТОР COOL-TIP МАЄ РЯД ПЕРЕВАГ



Малоінвазивний  
метод під наглядом КТ  
або УЗД



Додатковий  
датчик  
температури



Інноваційна форма  
голки електрода, яка  
легко проникає  
в об'ємні утворення



Надпотужний  
генератор  
200Вт



4 офіційні протоколи  
абляції печінки, нирок,  
легень, кістки якісна  
візуалізація




Нові  
функції  
безпеки



Водяне  
охолодження  
електрода



Інтуїтивний  
інтерфейс

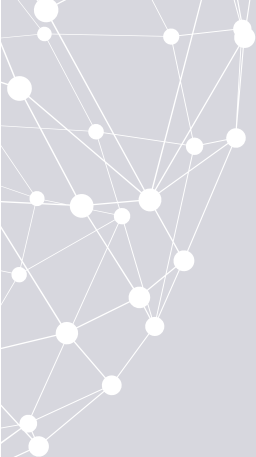

Генератор

Помпа


Контейнер  
для збору  
охолоджувальної  
рідини

Гачок  
для ємності з  
охолоджувальною  
рідиною

Візок

## ОБЛАДНАННЯ

КОД	ОПИС
Система РЧ-абляції	Cool-tip™ E Series включає:
RFAGEN	Cool-tip™ E Series
RFA PAC	Набір компонентів для Cool-tip™ E Series
FT900	Візок

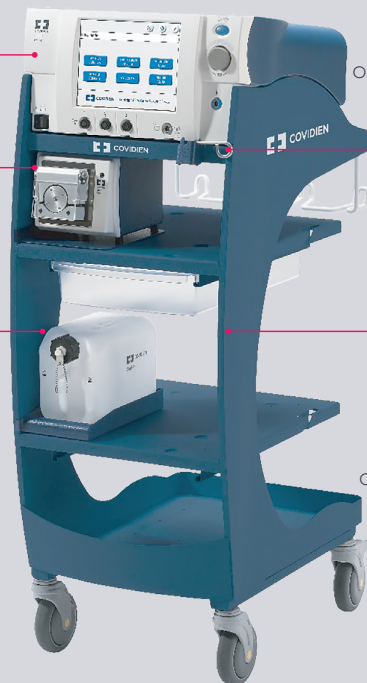

Педаль  
Старт, зупинка  
та відновлення зі  
стерильного поля



## НАБОРИ ОДИНОЧНИХ ГОЛЧАСТИХ ЕЛЕКТРОДІВ

(1 голчастий електрод, 1 пластина пацієнта, 2 трубки)

КОД	ОПИС	Довжина	Довжина роб. частини	Кількість, шт
RFA1510	Набір з голчастим електродом для Cool-tip E Series	15 см	1 см	1
RFA1530	Набір з голчастим електродом для Cool-tip™ E Series	15 см	3 см	1
RFA2020	Набір із голчастим електродом для Cool-tip™ E Series	20 см	2 см	1
RFA2030	Набір із голчастим електродом для Cool-tip™ E Series	20 см	3 см	1
RFA2530	Набір з голчастим електродом для Cool-tip™ E Series	25 см	3 см	1



м. Київ, вул. Антона Цедіка, 12

cor-medical.ua