

Відносини по-
новому
Партнерство, якого
Ви заслуговуєте



Степлер GIA з технологією DST
Брошура

Medtronic
Further, Together

Степлер GIA з технологією DST

Особливості

Цей лінійний ріжучий степлер розроблено з технологією DST з висотою скріпок 4,8 мм, 3,8 мм, 2,5 мм може покращити формування скріпок та збільшити опір для протікання



Запобіжник
Закриває ніж до та після прошивання та запобігає випадковому розрізанню до зажимання тканин



Одноразова касета
З безпечним зчепленням. Новий ніж в кожній касеті.

Накінецьник без штифта
Для атравматичного введення.



Ніж із 440 нержавіючої сталі
В кожній касеті

Вставки для тримання
Для ергономіки та сили прошивання



Кнопка швидкого відкриття
Для легкого відкриття



Регульована ручка для прошивання
Дає можливість хірургу прошивати з будь-якої сторони інструменту

Важіль зажиму касети
Для доступу



Зажим заднього або центрального шарніра
Для розташування однією рукою



ПОРТФОЛІО + СТАНДАРТИЗАЦІЯ + ОБСЛУГОВУВАННЯ

DST SERIES™ ТЕХНОЛОГІЯ




ТРАДИЦІЙНА СРІПКА

Круглий переріз дроту більш схильний до згинання в будь-якому напрямку в складних умовах.



DST SERIES™ ТЕХНОЛОГІЯ

Дріт прямокутного перерізу надійніше згинається за призначенням

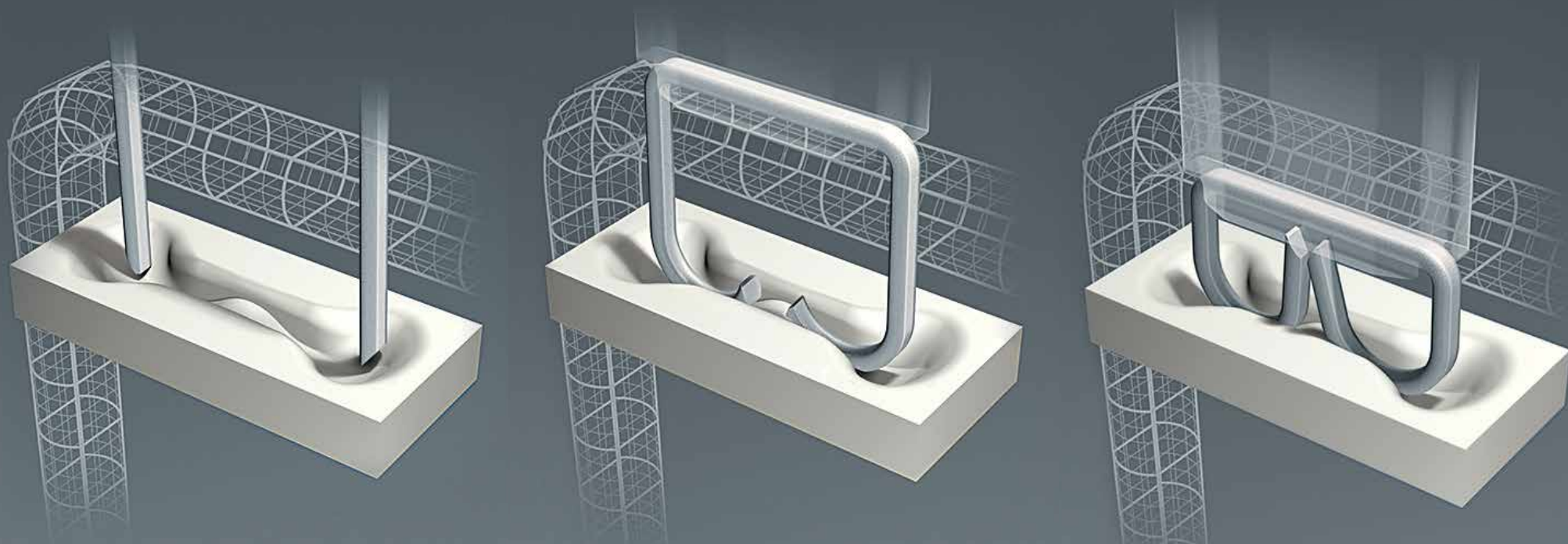

Степлер GIA з технологією DST Series™ Технічні характеристики продукту для одноразового степлера

Степлер	Опис продукту	Картриджи в наявності	Висота скріпки перед закриттям	Приблизна висота закритої скріпки	Колір	Кількість перезавантажень Кількість швів	Кількість скріпок	Ряди скріпок
GIA6025S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 60 mm	GIA6025L	2.5 mm	1.0 mm	Білий	7/8	64	4
GIA6038S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 60 mm	GIA6038L	3.8 mm	1.5 mm	Синій	7/8	64	4
GIA6048S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 60 mm	GIA6048L	4.8 mm	2.0 mm	Зелений	7/8	64	4
GIA8038S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 80 mm	GIA8038L	3.8 mm	1.5 mm	Синій	7/8	84	4
GIA8048S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 80 mm	GIA8048L	4.8 mm	2.0 mm	Зелений	7/8	84	4
GIA10038S	GIA™ степлер з DST Series™ технологією 100 mm	GIA10038L	3.8 mm	1.5 mm	Синій	7/8	104	4
GIA10048S	GIA™ Степлер з DST Series™ технологією 100 mm	GIA10048L	4.8 mm	2.0 mm	Зелений	7/8	104	4

